


Установка ПО Biosmart-Studio v6


Установка осуществляется в следующие каталоги:

Данные	Каталог
Исполняемые файлы сервера BioSmart	%programfiles%\BioSmart Studio 6\server
Исполняемый файл клиентского ПО	%programfiles%\BioSmart Studio 6\client
Сервер лицензий	%programfiles%\BioSmart Studio 6\licenseserver
Сервер базы данных PostgreSQL	%programfiles%\BioSmart Studio 6\db
Настройки сервера BioSmart	%programdata%\BioSmart
Настройки клиентского ПО	%appdata%\BioSmart
Данные БД	%programdata%\bsdb


Перед установкой ПО убедитесь, что ваша учетная запись обладает правами администратора. Если таких прав нет, то установочный файл можно запустить от имени администратора, выбрав соответствующую функцию в контекстном меню.

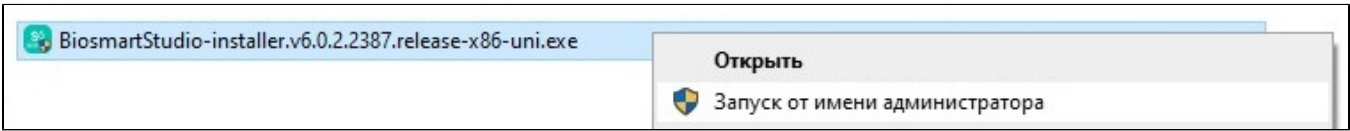

После запуска появится диалоговое окно выбора языка устанавливаемого ПО. Выберите язык и нажмите **ОК**.

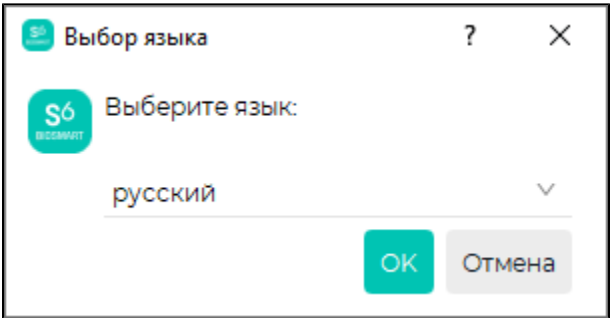

Для продолжения установки нажмите **Далее**.

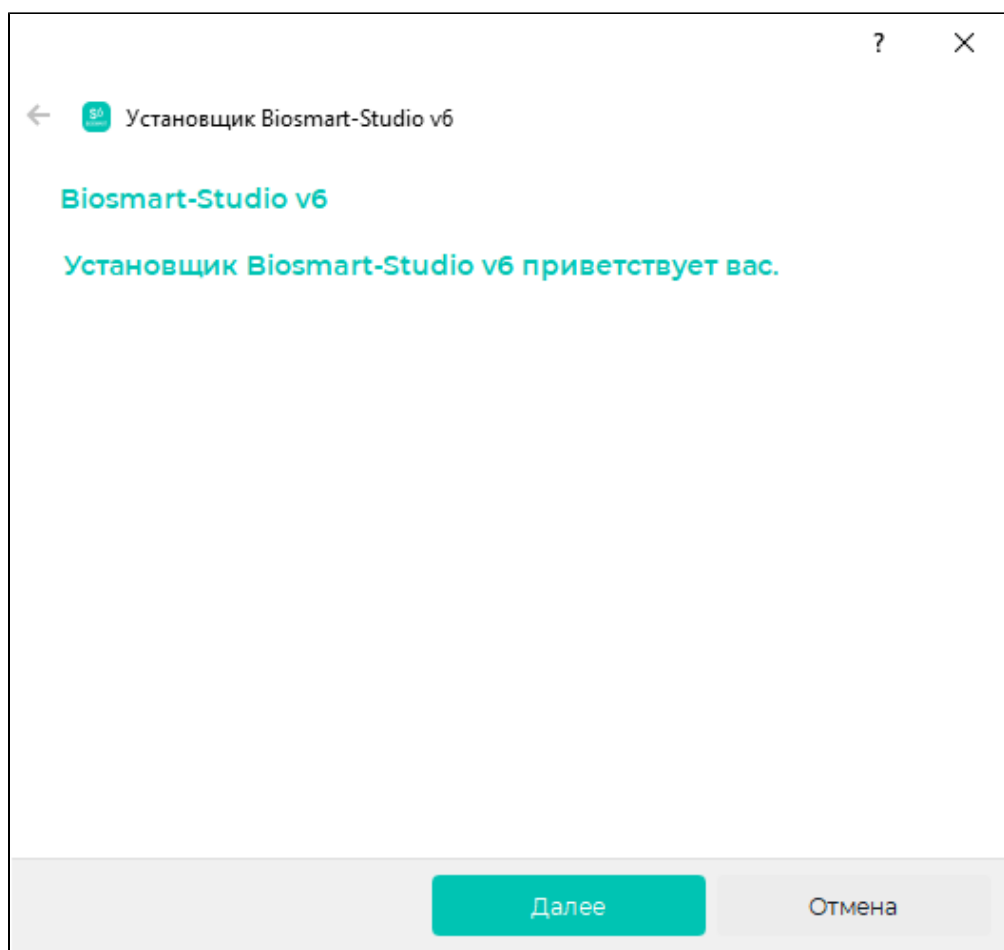

Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите **Да, я принимаю условия лицензионного соглашения**. Нажмите **Далее**.

?

✕

←  Установщик Biosmart-Studio v6

Лицензионное соглашение Biosmart-Studio v6

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по программному продукту «BioSmart-Studio v6»

Настоящее Лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является правовым документом, регулирующим отношения между ООО «Прософт-Биометрикс», именуемым далее Разработчик, и юридическим или физическим лицом, именуемым далее Пользователь, использующим программный продукт с торговой маркой, включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях или на Web-сайте Разработчика, любые печатные материалы и любую "встроенную" или электронную документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Пользователь, не согласный с условиями настоящего Соглашения, не имеет права устанавливать и использовать данный программный продукт.

Соглашение имеет юридическую силу в соответствии со статьей 14 Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных".

1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ

Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Программа лицензируется, а не продается.

2. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.

☒ Да, я принимаю условия лицензионного соглашения

☐ Нет, я не принимаю условия лицензионного соглашения


В составе Biosmart-Studio v6 использованы компоненты, в соответствии с условиями [лицензий](#)

Далее



Отмена

Выберите компоненты системы, устанавливаемые на данный ПК:

- **Biosmart-Studio v6 базовый** – серверная и клиентская части ПО;
- **Biosmart-Studio v6 NetWork Клиент** – только клиентская часть ПО;
- **Biosmart-Studio v6 NetWork Сервер** – только серверная часть ПО;
- **Biosmart-Studio v6 Мониторинг** – только плагин **Мониторинг** клиентской части ПО.

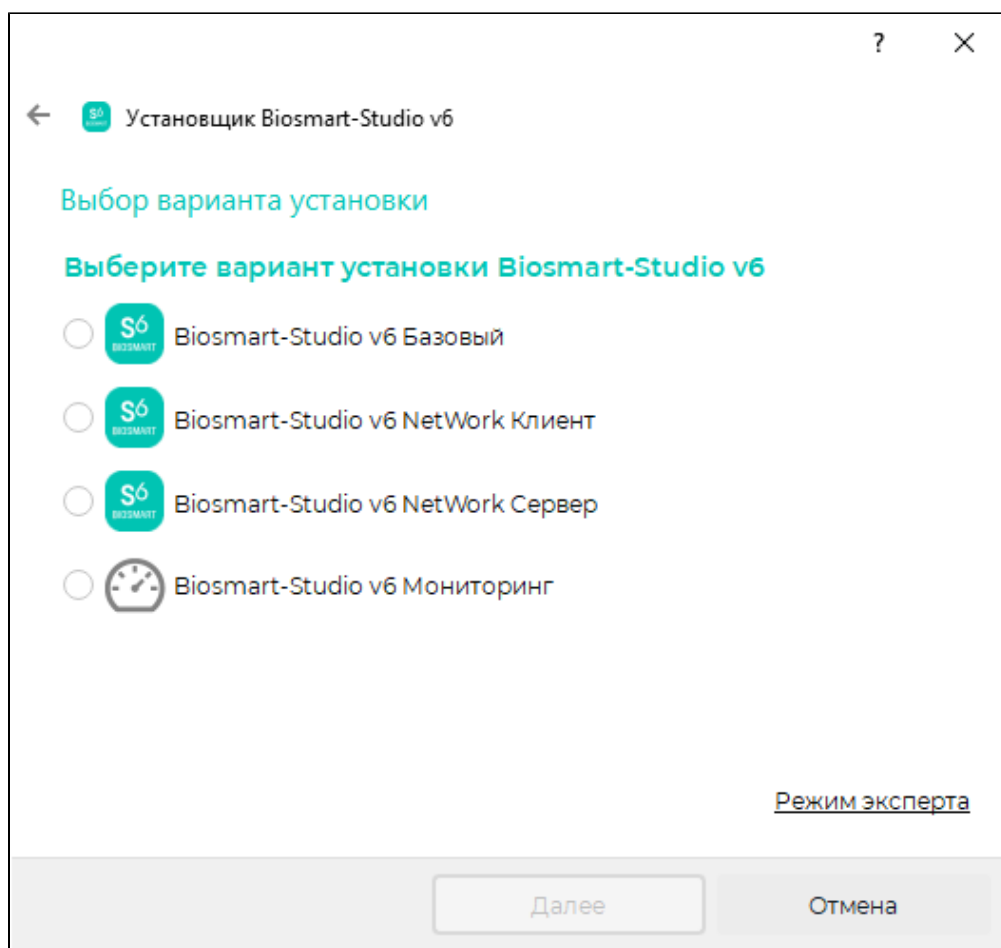


Для выборочной установки элементов ПО нажмите кнопку **Режим эксперта**. В этом режиме можно настроить установку отдельных программных модулей, например, установить Сервер лицензий на отдельный ПК. Выберите необходимый вариант установки ПО и нажмите **Далее**.

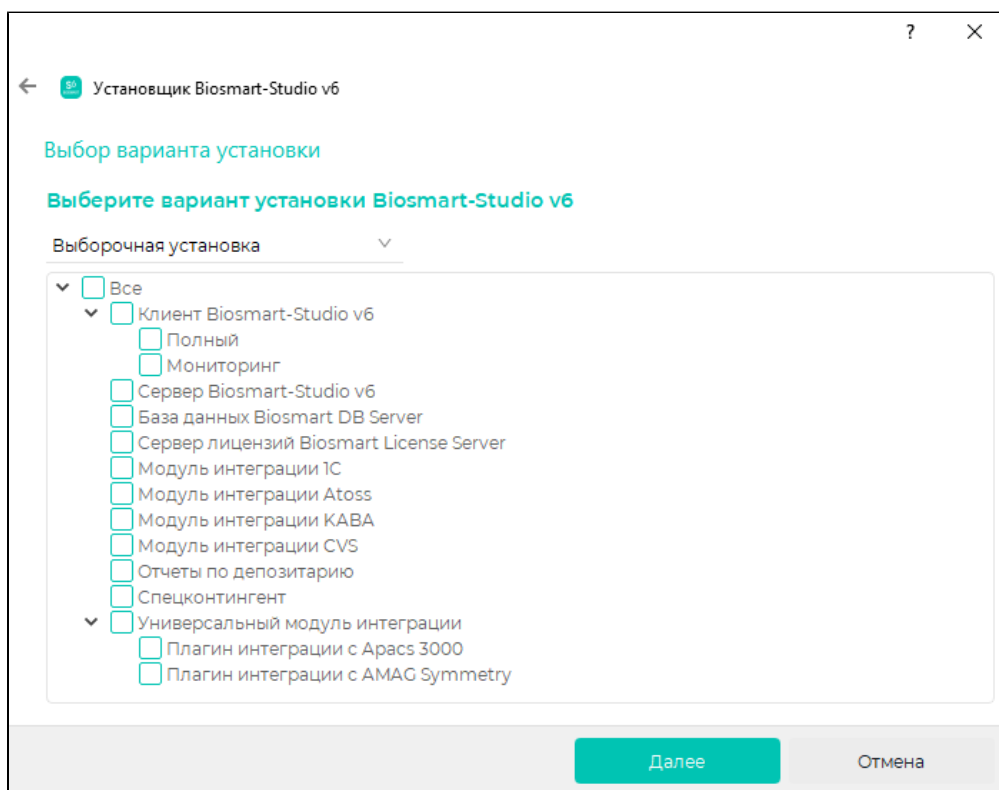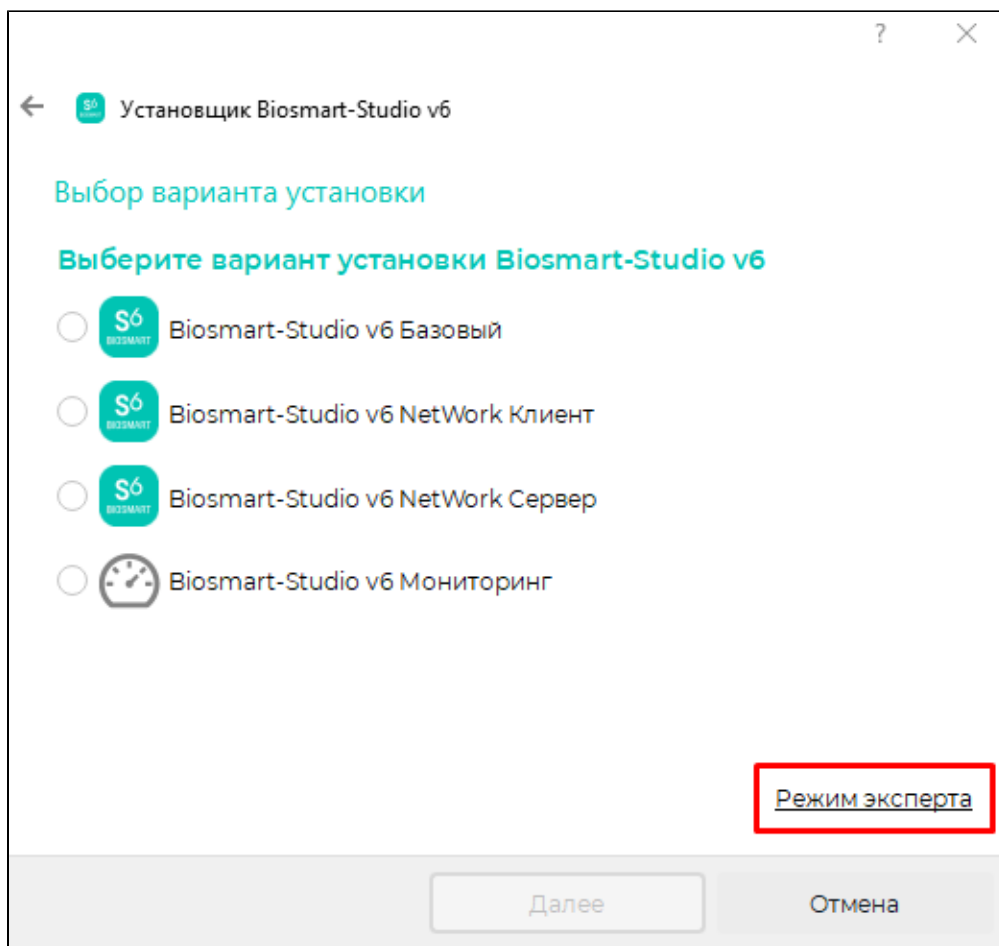

На следующем этапе необходимо создать или загрузить SSL-сертификат, обеспечивающий работу защищенного сетевого подключения между клиентом и сервером BioSmart. В открывшемся окне выберите источник получения SSL-сертификата:

- **Создать самоподписанный сертификат** - сертификат создается непосредственно в ПО Biosmart-Studio v6;
- **Загрузить сертификат из файла** – загружается файл с сертификатом, созданным специализированным удостоверяющим центром.

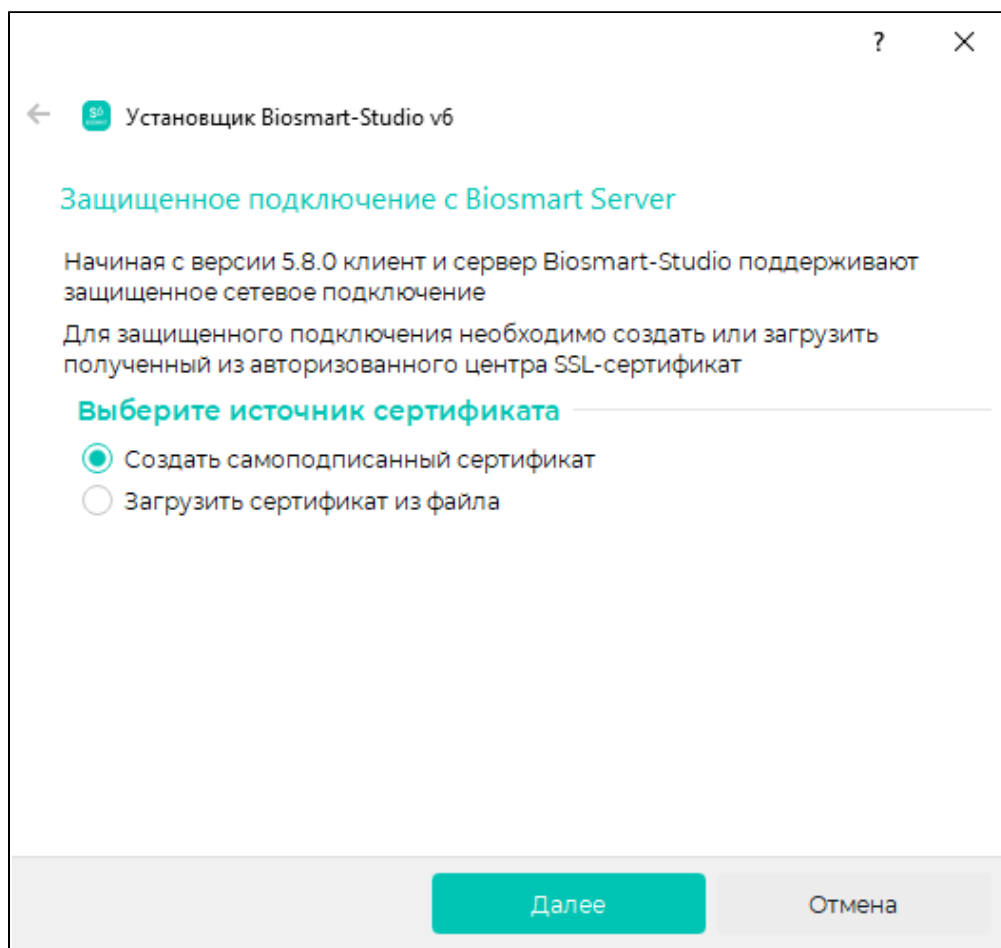

Если у Вас нет SSL-сертификата выберите **Создать самоподписанный сертификат**. Откроется окно с полями для создания сертификата.

В поле **Название сертификата** введите текст названия сертификата.

В поле **Страна** выберите из выпадающего списка страну, набрав на латинице первые две буквы (например, **RU** для Российской Федерации).

В поле **Административная единица** введите название административной единицы (области, края, республики).

В поле **Город** введите название населённого пункта.

В поле **Организация** введите название организации.

В поле **Подразделение** введите название подразделения.

В поле **Имя узла** введите название ПК, на котором производится установка ПО Biosmart-Studio.

?

×

←

80

Установщик Biosmart-Studio v6

Создание самоподписанного сертификата Biosmart Server

Название сертификата *

Сертификат Biosmart-Studio

Страна (C)

RU Russian Federation

▼

Адм.-терр. единица (ST)

Свердловская область

Город (L)

Екатеринбург

Организация (O)

ООО "Прософт-Биометрикс"

Подразделение (OU)

Отдел технической поддержки

Имя узла (CN) *

SIS000313

Сертификат для клиента Biosmart-Studio будет сохранен в каталог C:
\\ProgramData\\Biosmart

Далее

Отмена

Если у Вас есть файлы с SSL-сертификатом из специализированного удостоверяющего центра, то выберите **Загрузить сертификат из файла**. Откроется окно с полями для ввода расположения файлов.


В поле **Сертификат** укажите расположение файла сертификата (формат **.CRT** или **.PEM**).

В поле **Приватный ключ** укажите расположение файла приватного ключа (формат **.KEY** или **.PEM**).

Поле **Корневой сертификат** в настоящее время не используется.

Обновить информацию о сертификате можно будет с помощью [ПО Biosmart Admin](#).

После заполнения полей нажмите **Далее**. Откроется окно установки ПО Biosmart-Studio.

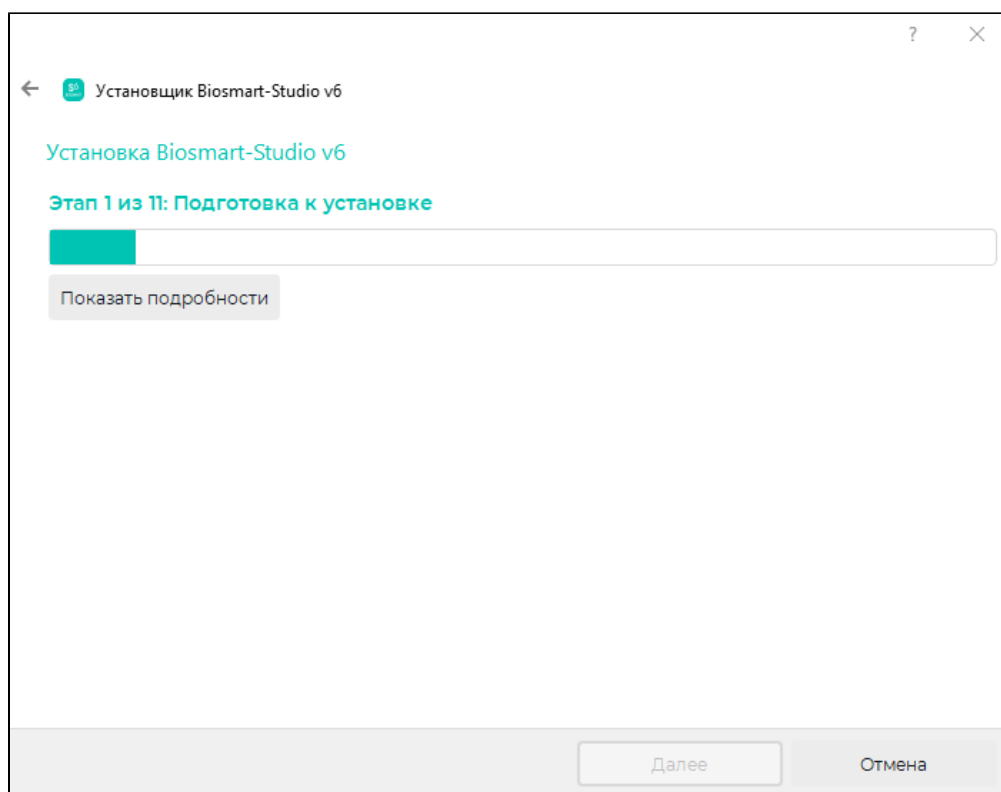

После завершения установки нажмите кнопку **Далее**, а затем **Выход**.

